


Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

Bruksanvisning

Bilaga Stabilitetsband

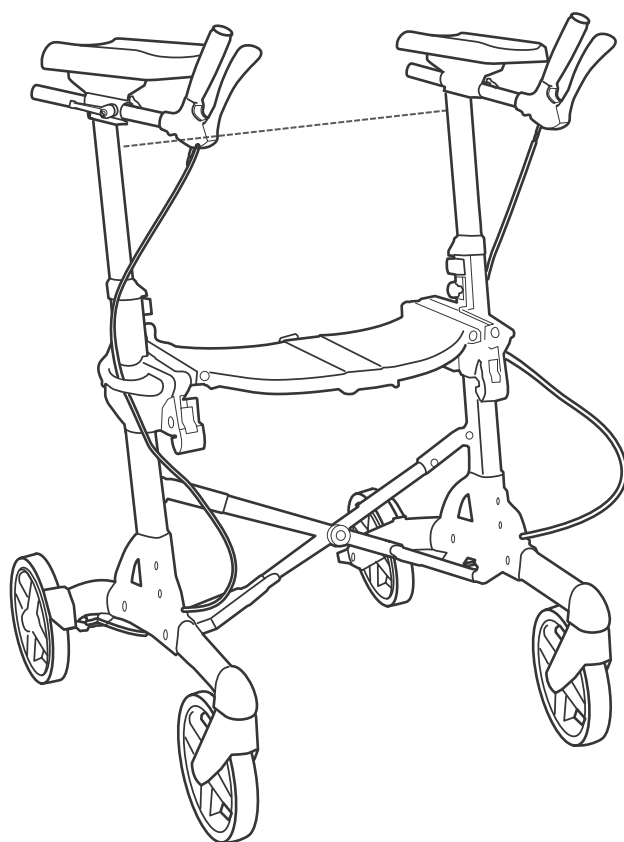

VOLARIS

RA

RA Outdoor

Stabilitetsband

Stabilitetsbandet ger en stadigare upplevd hantering genom att effekten av krysskonstruktionens flexibilitet begränsas. Stabilitetsbandet levereras som standard på RA och RA Outdoor.

RA-rollatorn går att använda utan bandet.

Stabilitetsbandet är monterat med karbinhakar för enkel montering och demontering. För att lossa karbinhaken tryck in låsklacken enligt bilden nedan. Genom att trycka armstöden något mot varandra blir bandet mindre spänt, vilket underlättar montering/demontering.

Vid temporär demontering lossas karbinhaken på ena sidan. Bandet hänger då kvar i den andra karbinhaken.

